



MultiPrep™ 8”
Прецизионные
полировальные системы

*ВЫСОКОТОЧНАЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ
ПРОБОПОДГОТОВКА ДЛЯ ШИРОКОГО
ДИАПАЗОНА МАТЕРИАЛОВ*

Качественные изделия для подготовки и анализа металлографических образцов

Система MultiPrep™ представляет собой программируемый станок, который позволяет осуществлять точную полуавтоматическую пробоподготовку широкого спектра материалов для микроскопических исследований (**оптических, сканирующей электронной микроскопии (SEM), ионно-лучевой литографии (FIB), просвечивающей электронной микроскопии (TEM), атомно-силовой микроскопии (AFM) и т. д.**).

Его возможности включают в себя параллельную полировку, точную полировку под углом, полировку в зависимости от специфических условий или любое сочетание данных способов полировки. Он обеспечивает воспроизводимость результатов пробоподготовки, независимо от уровня профессиональных навыков пользователей, устраняя влияние «человеческого фактора».

Система из двух микрометров (задающих радиальный и осевой наклон плоскости) позволяет с высокой точностью задавать расположение образца относительно абразивной плоскости. Жестко индексированный в плоскости Z шпиндель поддерживает заранее установленное геометрическое положение в процессе шлифования/полировки.

Цифровые индикаторы позволяют количественно отслеживать уровень съема материала в режиме реального времени (спереди) или выполнить предварительную установку (сзади) для работы в автоматическом режиме. Регулируемая скорость вращения и колебаний позволяет максимально полно использовать всю поверхность абразивного/полировального круга и минимизировать вероятность появления дефектов. Регулируемая нагрузка даёт возможность работать с разными размерами образцов: от небольших (тонких) до крупных.

Прецизионные/магнитные приводные круги, комплектующие и расходные материалы продаются отдельно.

Артикул	Описание
15-2200	Система 15-2200 MultiPrep™, 8 дюймов, 100-240 В
15-2200-ТЕМ	Система 15-2200-ТЕМ MultiPrep™ ТЕМ, 8 дюймов, 100-240 В

Размеры: 15 дюймов ширины x 27 дюймов глубины x 22 дюйма высоты (381 x 685 x 560 мм)
Масса: 95 фунтов (43 кг)

Технические характеристики шлифования/полировки:

- Регулируемая скорость приводного круга: 5-350 об/мин (приращение оборотов: 5 об/мин)
- 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей с записью на клавиатуру для управления всеми функциями
- Интуитивно понятный интерфейс, оптимизированный для обеспечения производительности и функциональности
- Беспрепятственная интеграция с дополнительным устройством автоматического дозирования суспензий № 5-7100 AD-5™ для обеспечения полностью автоматической работы
- Двигатель с высоким крутящим моментом 0,5 л.с. (375 Вт)
- Устойчивая конструкция основания, выполненная из алюминия и нержавеющей стали
- Таймер для ведения отсчета в прямом или обратном направлении
- Вращение приводного круга по часовой стрелке/против часовой стрелки
- Электронная система подачи охлаждающей жидкости с регулируемым клапаном
- Выдвигающийся наконечник для подачи охлаждающей жидкости, позволяющий быстро и легко выполнить очистку образца/чаши

- Литой моноблочный коррозионно-стойкий и ударопрочный корпус со сливом - защитой от переполнения для защиты внутренних компонентов
- Аварийный выключатель
- Соответствие требованиям ЕС
- 1 (один) год гарантии
- Разработан и изготовлен компанией «Allied» в США



Головка позиционирования



Технические характеристики головки позиционирования:

- Передний цифровой индикатор для отображения съема материала (продвижения образца) с функцией обнуления, в режиме реального времени, разрешение 1 мкм
- Прецизионный шпиндель, который индексирует образец перпендикулярно приводному кругу с одновременным вращением
- 2х-осевое, контролируемое микрометром, угловое позиционирование образца (задающее продольный и поперечный наклон плоскости) в пределах диапазона +10/-2,5° (с шагом 0,02°)
- Задний цифровой индикатор для отображения вертикального позиционирования (статического) с функцией обнуления, разрешение 1 мкм
- Автоматическое колебание образца, регулируемая развертка с 8 скоростями
- Полное или ограниченное автоматическое вращение образца с 8 скоростями
- Система эксцентрикового зажима, которая устраняет необходимость в инструментах и позволяет точно позиционировать зажимные приспособления
- Переменная нагрузка образца: 0-600 г (приращение 100 г)

Системы привода вращения

Система MultiPrep™ поставляется либо с зубчатым приводом, либо с кольцевым приводом для вращения образца.

Зубчатый привод



Система зубчатого привода рекомендуется для подготовки более крупных, твердых, прочных или инкапсулированных материалов. Она обеспечивает нескользящее вращение в случаях более высоких нагрузок.

Данный привод включен в систему № 15-2200.

Кольцевой привод



Кольцевой привод больше подходит для подготовки тонких неинкапсулированных материалов, обычно связанных с утонением образца в форме клина для просвечивающей электронной микроскопии ТЕМ. Кольцевой привод способен поглощать тонкие резистивные движения, которые в противном случае могли бы вызвать разрушение материала.

Данный привод включен в систему № 15-2200-ТЕМ.

Сенсорный ЖК-дисплей



7-дюймовый цветной жидкокристаллический сенсорный экран используется для управления всеми функциями и чрезвычайно удобен для навигации, что обеспечивает большую эффективность для пользователей. Интуитивно понятный интерфейс включает в себя значки и оптимизирован для повышения производительности и функциональности.

Прецизионные приводные круги



Стандартный приводной круг



Магнитный приводной круг

Прецизионные приводные круги соединены внахлестку параллельно в пределах 2 мкм и на них нанесено твердое анодированное покрытие для обеспечения максимальной износостойкости. Они используются с обычными дисками или дисками, покрытыми клеем. Магнитные приводные круги представляют собой сочетание прецизионного приводного круга с магнитной поверхностью с сеточной насечкой для обеспечения максимальной плоскостности и сцепления. Это позволяет использовать все шлифовальные ткани/абразивные диски магнитной системы или ферромагнитные диски.

Артикул	Описание
10-1005	Прецизионный приводной круг, 8 дюймов (203 мм)
10-1005M	Прецизионный магнитный приводной круг, 8 дюймов (203 мм)

Комплектующие

Широкий выбор стандартных зажимных приспособлений и комплектующих. Интерфейс эксцентрикового зажима обеспечивает удобство монтажа и демонтажа без использования инструментов. Имеются специальные зажимные приспособления для различных видов применения. Обратитесь к компании «Allied» для получения дополнительной информации.




15-1005

Адаптер эксцентрикового зажима для держателей поперечного сечения/утонения



15-1010

Держатель образцов для поперечного сечения

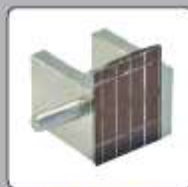

15-1010-RE

Держатель образцов для поперечного сечения с опорным краем



15-1012

Держатель для образцов в форме клина для TEM/утонения FIB (со вставкой из жаропрочного стекла)



15-1014

Держатель для образцов в форме клина для TEM/утонения FIB



15-1018

Держатель для подготовки образцов (утонения) к SIMS, TEM микроскопии



15-1020

Держатель для параллельной полировки 2,25 дюйма (57 мм)



15-1020-80 мм
15-1020-100

Держатель для параллельной полировки 80 или 100 мм



15-1025

Каплевидный держатель, диаметр 40 мм



15-1035

Набор грузов



15-1045

Многоцелевой держатель, ширина 2 дюйма



15-1047

Многоцелевой держатель, ширина 1 дюйм



15-1050

Держатель образцов для поперечного сечения с зажимом



15-ACMPF

Комплект комплектующих/держателей в ассортименте MultiPrep™




120-30015

Измерительная система с цифровым индикатором

Стандартные виды применения

Удаление слоев проводников

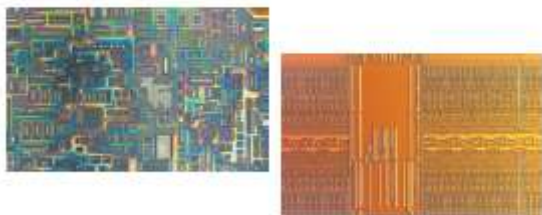

Удаление слоев проводников печатной платы для проверки дефектов и физического осмотра.

Прецизионное поперечное сечение



Подготовка прецизионного инкапсулированного или неинкапсулированного поперечного сечения полупроводниковых приборов матричного или пакетного уровня, а также широкого спектра других материалов.

Утонение для вторично-ионной масс-спектропии



Утонение полупроводников или других подложек до менее чем 200 нм для проведения вторично-ионной масс-спектропии SIMS задней стороны

Серийное выполнение сечения



Подготовка полированных областей 2D конструкций через определенные промежутки, чтобы обеспечить 3D-реконструкцию материалов для анализа.

Утонение образцов в виде клина для ТЕМ



Подготовка образцов в виде клина из массивного материала для проведения просвечивающей электронной микроскопии ТЕМ.

Полировка оптики/оптических устройств



Полировка широкого спектра оптических компонентов и волокна без покрытия.

Выполнение тонких сечений



Подготовка тонких сечений для петрографии/геологии.

Подготовка для дифракции отраженных электронов



Подготовка поверхностей, не содержащих дефектов, на самых разных материалах для анализа EBSD (дифракция отраженных электронов).

Дозатор суспензий AD-5™

Устройство автоматического дозирования суспензии AD-5™ обеспечивает автоматическую подачу абразивных полировальных суспензий и смазочно-охлаждающих жидкостей. Его функции программируются с помощью сенсорных переключателей на лицевой панели и активируются через MultiPrep™. Данный дозатор может использоваться как отдельная независимая система с полировальным станком ЛЮБОЙ марки и производителя.

Программируемое по времени, контролируемое по объему дозирование с переменной частотой обеспечивает повторяемые результаты, устраняя влияние «человеческого фактора». Это повышает производительность и эффективность пробоподготовки при одновременном уменьшении потребления расходных материалов. Интуитивно понятная навигация по меню и легкость в программировании делают дозатор простым в использовании.

AD-5™ имеет пять (5) положений дозирования, два из которых включают в себя цикл промывки для предотвращения забивания при использовании коллоидных суспензий. Перистальтический насос обеспечивает подачу капель суспензий и смазочно-охлаждающих жидкостей на поверхность носителя (ткани) без образования тумана.

Технические характеристики:

- Пять (5) позиций дозирования: объем 16 унций (500 мл). Имеется переходник на канистры 128 унций (3,8 л).
- Определяемая пользователем маркировка меню (тип и размер абразива, смазочно-охлаждающей жидкости, ткани, материала и названия меню).
- Обратная работа насоса после цикла для предотвращения просачивания капель, загрязнения.
- Функция удаленного управления обеспечивает бесперебойную интеграцию и автоматическую активацию со шлифовально-полировальными системами производства компании «Allied».
- Локальное функционирование обеспечивает возможность использования с любым шлифовально-полировальным станком.
- Длительность импульса: 0,5-6 с (с шагом 0,5 с)
- Частота импульсов: 1-10 в минуту.
- Заливка без прерывания, что обеспечивает временное дозирование жидкости на полирующую поверхность в режиме «полной мощности», без пауз.
- Сенсорные функции заливки в одно касание для быстрой начальной заправки шлифовальной ткани.
- Активизация в одно касание без использования меню для упрощения управления.
- Предпусковая заправка новой/сухой шлифовальной ткани.
- Позволяет дозирование коллоидных суспензий (оксид кремния, оксид кремния/оксид алюминия и оксид алюминия) с функцией ополаскивания/промывки для предотвращения засорения.
- Два (2) положения высокоскоростных насосов для полирования оксида.
- 25 программируемых меню.
- Мембранные влагостойкие кнопки для управления всеми функциями.
- Четырехстрочный ЖКД с подсветкой.
- Соответствие требованиям ЕС.
- 1 (один) год гарантии.
- Разработан и изготовлен компанией «Allied» в США



Система MultiPrep™ с дозатором суспензий AD-5™

Артикул	Описание
5-7100	AD-5™, 100-240 В

Размеры: 8 дюймов ширины x 25 дюймов глубины x 9 дюймов высоты (203 x 635 x 228 мм)
Масса: 28 фунтов (13 кг)




25 программируемых меню



В удобном поворотном манипуляторе с форсунками предусмотрены насадки из нержавеющей стали, которые легко снимаются для очистки

Размеры

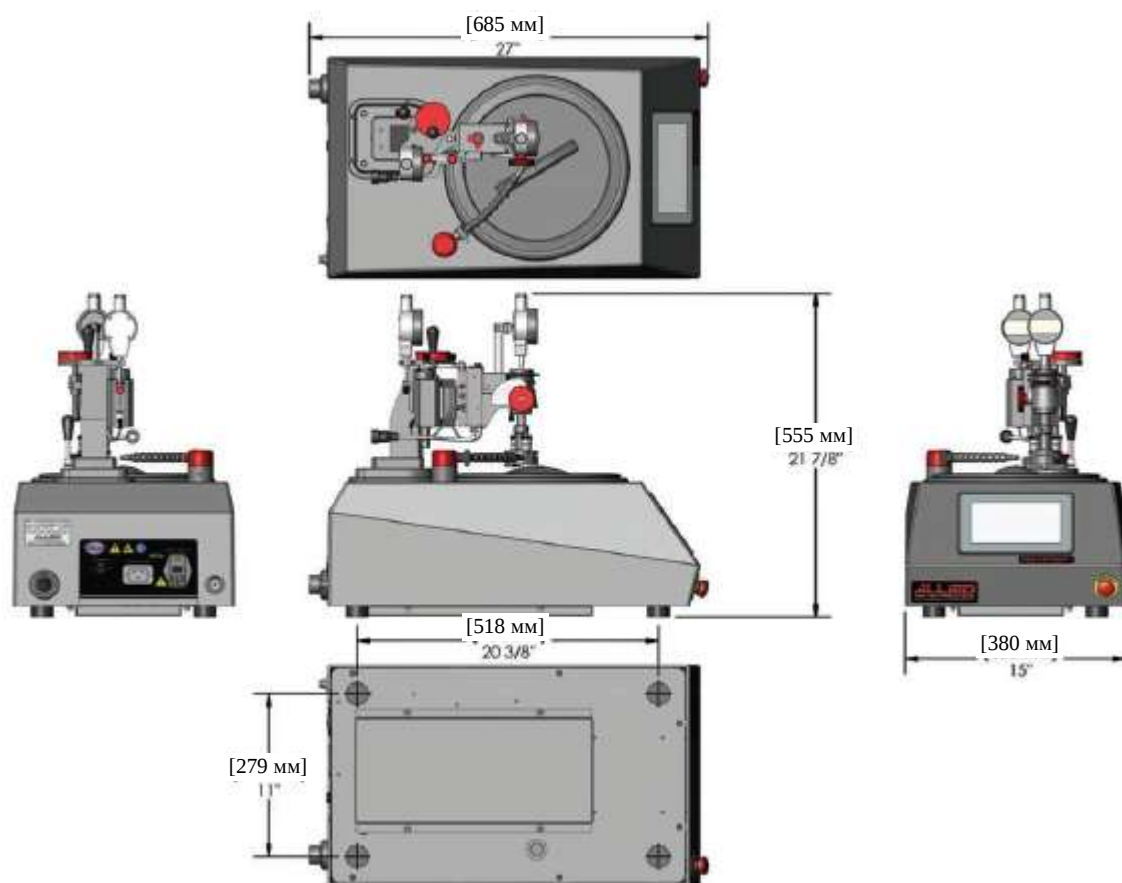

Технические характеристики шлифовально-полировального станка	
Частота вращения приводного круга	5-350
Мощность (л.с.)	0,5
Мощность (Вт)	375
Дисплей	7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей
Электроника	Управление микропроцессором
Рабочие напряжения	100-240 В
Европейское соответствие	Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2014/30ЕС Директива ЕС по низковольтному электрооборудованию 2014/35/ЕС Директива ЕС «О безопасности машин и оборудования» 2006/42/ЕС
Масса	95 фунтов (43 кг)
Гарантия	2 года
В комплект поставки входят	Антибрызговое кольцо, крышка приводного круга, контейнер для хранения держателей/комплектующих, CD-диск MultiPrep™ с процедурами, руководство по эксплуатации, калибровочный набор: прецизионный приводной круг 8 дюймов (230 мм), циферблатный микрометр + приспособление для крепления микрометра

Технические характеристики головки позиционирования	
Частота вращения образца	8 скоростей
Колебание образца	8 скоростей
Перемещение образца	Разрешение 1 мкм
Угловое позиционирование	Диапазон: +10°/-2,5° (с шагом 0,02°)
Нагрузка образца (г)	0-600

Глобальное распространение наиболее качественных продуктов в мире



Брошюра № MPS-2018

В оборудование в любой момент могут вноситься изменения в связи с внедрением инноваций/усовершенствованием.



Разработано и изготовлено компанией «Allied High Tech Products, Inc.» в США.

Компания «Allied High Tech Products, Inc.»

310.635.2466 По всему миру/800.675.1118 США и Канада
90220 Калифорния, Ранчо Домингес, Пасифика Плейс Е. 2376
Посетите наш сайт! AlliedHighTech.com